


装置に取り入れられた ユーザーの要望集

2022年4月にリリースされたAquilion Serve や昨年11月にリリースされた Aquilion ONE / INSIGHT Edition には、これまで全国のユーザーから募集しデスク会議で議論されたご要望を多く取り入れています。従来装置から改善された項目を連載でご報告いたします！

スキャンの再撮影

スキャングラムを撮り直す時[Quit Exam]をしなくてもできるようにしてほしいとの要望がデスク会議で取り上げられ、新装置に反映しました。位置決め画像である3D Landmarkを撮影し直したいときもプロトコル選択画面へ戻らずに行えます。

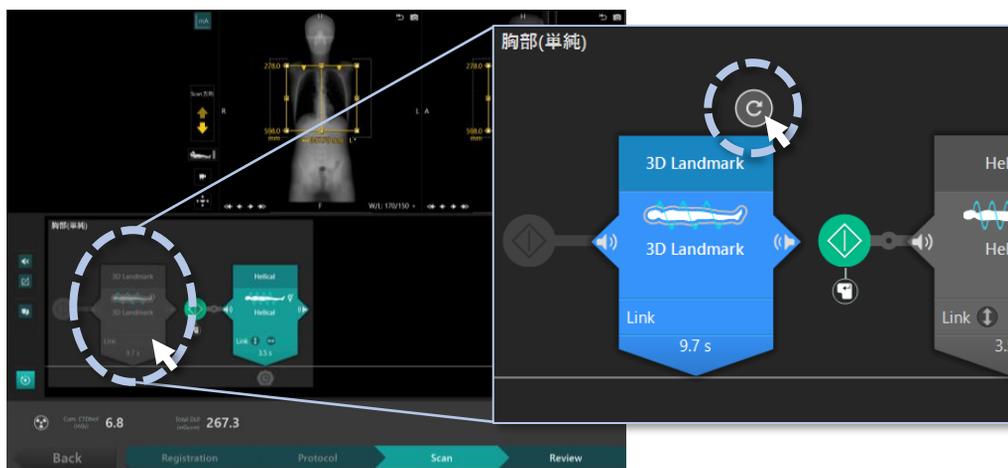

撮影中画面 (3D Landmark撮影後)

撮影後の3D Landmarkバッジを選択して  マークをクリックすると再撮影が行えます。

Reset メニュー

マウスカーソルを画面左上に置くと出現するシステムリセットツールでは誤ってReset メニューを選択してしまい、意図せずソフトの再起動がかかってしまうとのことのご意見を受けてシステムリセットツールを2段階のメニュー選択に変更しました。



Launch Reset Toolにカーソルを合わせるとReset メニューが起動します。